

Exsanguination

Brassards roulants en silicone

- Exsanguination facile et rapide (alternative aux Bandages Esmarch)
- Matériau: Silicone, transparents
- Reutilisables, autoclavables à 134°C (18mn)
- Sans latex

Taille	Code couleur	Circonférence du membre	REF
0	gris	16-21 cm	21-95-710
1	blanc	20-28 cm	21-95-711
2	bleu clair	26-33 cm	21-95-712
3	jaune	31-40 cm	21-95-719
4	rouge	38-49 cm	21-95-722
5	vert	47-60 cm	21-95-727
6	bleu foncé	58-70 cm	21-95-729



Pompe à main

avec manomètre et
1 m de tube de connexion

REF 21-95-350



Manomètre

avec 1 m de tube de connexion

REF 21-95-300

Frein pour brassards roulants

Matériau: Silicone,
autoclavables à 134°C (18 mn)


petit REF 21-95-200
large REF 21-95-201



Bande de mesure

code couleur, afin d'identifier facilement le
brassard correspondant à la taille du
membre

REF 21-95-111

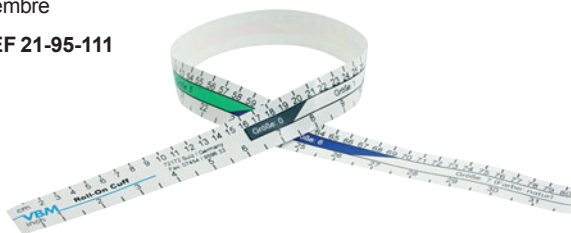

Kit complet brassards roulants

petites tailles

kit complet avec des brassards roulants # 1-4, manomètre avec
tube de connexion, bande de mesure, frein petit et large

REF 21-95-400

Kit complet brassards roulants

grandes tailles

kit complet avec des brassards roulants # 3-6, manomètre
avec tube de connexion, bande de mesure, frein petit et large

REF 21-95-401

REF 21-95-400

Bandages Esmarch

autoclavables à 134°C (18mn), boîte 1
sans latex
Longueur: 5 m

Largeur	REF
6 cm	20-20-060
8 cm	20-20-080
10 cm	20-20-100
12 cm	20-20-120
15 cm	20-20-150



usage unique, stérile, boîte 10
sans latex

Longueur: 4 m

Largeur	REF
6 cm	20-21-060-1
8 cm	20-21-080-1
10 cm	20-21-100-1
15 cm	20-21-150-1



Longueur: 3 m

Largeur	REF
8 cm	20-23-080-1

Manches d'exsanguination à trois chambres

Pour exsanguination automatique à l'aide des garrots 2800, 5000 et 5800

Grâce au système à trois chambres la manche est gonflée automatiquement de l'extrémité vers le brassard.

La manche peut être ajustée à différentes tailles de membres à l'aide des trois fermetures éclair.

L'exsanguination est alors réalisée très rapidement. Les enveloppes internes peuvent être remplacées et sont disponibles séparément.



REF 20-13-341



REF 20-13-343

Manche d'exsanguination à trois chambres, pour bras
Manche d'exsanguination à trois chambres, pour jambe

REF 20-13-341
REF 20-13-343

