

VBM MANUJET III

Der Manujet III mit Jet-Ventilations Kathetern ist eine Notwendigkeit für Notfallstationen, Ambulanzen und Operationsräume, da er eine schnelle und effiziente Oxigenierung eines Patienten ermöglicht

Notfallanwendungen

- Als lebensrettendes Manöver in der “cannot intubate – cannot ventilate” Situation zur Oxigenierung, um einen schweren Sauerstoffmangel des Patienten zu verhindern
- In präklinischen Anwendungen, wenn eine Obstruktion der oberen Luftwege vorliegt. Trans Tracheale Jet Beatmung (TTJV) ist in Notfallsituationen schneller und einfacher als eine Tracheotomie, mit weniger Komplikationen

Elektive Anwendungen

- Micro laryngeale Chirurgie
- Starre Bronchoskopie
- HNO Chirurgie
- Unterstützung einer schwierigen fiberoptischen Intubation




Der Manujet III wird als komplettes Set mit Injektor und Kathetern geliefert. Das einfache, mechanische System ist leicht, tragbar und sofort einsatzbereit.

MANUJET III

mit 4m Druckschlauch, Jet-Ventilations Kathetern nach Ravussin (13G, 14G, 16G), 100cm Verbindungsschlauch, Endojet-Adapter (für ET Tubus) und Bronchoskop Adapter


REF
30-01-003

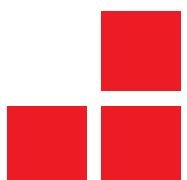

VBM Jet-Ventilations Katheter

nach Ravussin

Ermöglicht einen sicheren und atraumatischen transtrachealen Zugang zur Oxygenierung / Beatmung mittels manuellem Jet (Manujet III) oder automatischem Hochfrequenz Jet Ventilator

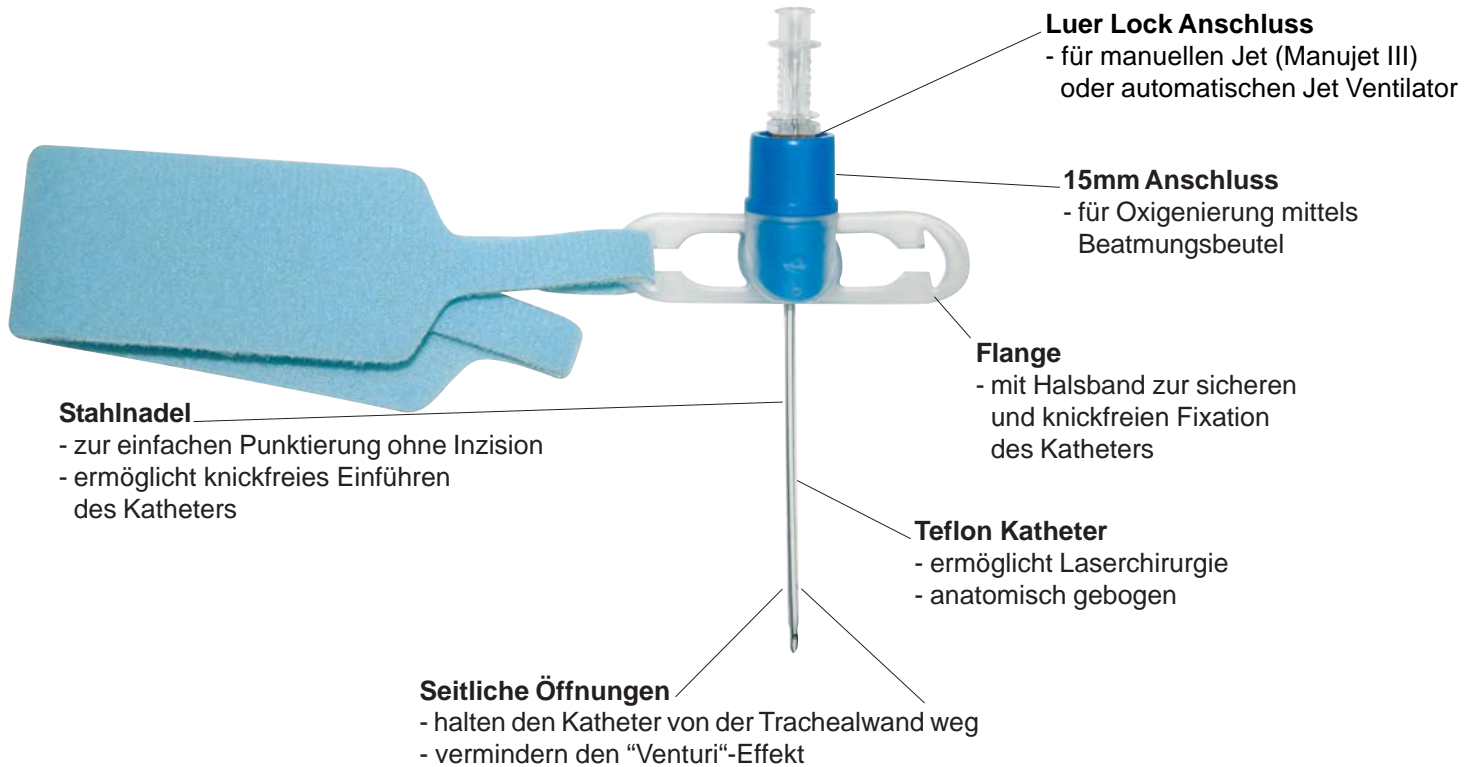

Bestellinformation

ANÄSTHESIE-SET

Jet Ventilations Katheter nach Ravussin
steril verpackt, 1VE = 5 Stück

| Größe | Patient | REF |
|-------|------------|-------------|
| 13G | Erwachsene | 30-02-013-1 |
| 14G | Kinder | 30-02-014-1 |
| 16G | Babys | 30-02-018-1 |


NOTFALL-SET

Jet Ventilations Katheter nach Ravussin
steril verpackt, Einzel-Set mit Spritze


| Größe | Patient | REF |
|-------|------------|-------------|
| 13G | Erwachsene | 30-02-913-1 |
| 14G | Kinder | 30-02-914-1 |
| 16G | Babys | 30-02-918-1 |

Verbindungsschlauch, 100cm lang mit Luer Lock

REF
54-05-111

 **Endojet Adapter**, zum Anschluss an den Endotracheal Tubus, 15mm I.D. drehbar, 22mm A.D. mit Expirationslöchern, 50cm verstellbarer Katheter mit Luer Lock, steril

30-03-111-1

 **Bronchoskop Adapter**, zum Anschluss an ein starres Bronchoskop, 15mm I.D. drehbar, mit Luer Lock

60-70-005

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany

Tel.: 07454 / 959650 • Fax: 07454 / 959633 • e-mail: verkauf@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

