

VBM MANUJET III

Le Manujet III avec les cathéters de Jet Ventilation, est très utile dans les services d'Urgences, SAMU, SMUR et bloc opératoires, pour une oxygénation rapide et efficace du patient.

Services d'Urgences

- Quand la vie du patient est en danger, dans le cas où celui-ci n'est ni intubable, ni ventilable "cannot intubate – cannot ventilate", le Manujet III permet l'oxygénation dans le cas de détresses respiratoires sévères.
- Utilisations en pré hospitalier, dans le cas d'obstruction des voies aériennes supérieures. La Jet Ventilation par voie transtrachéale est plus simple et rapide qu'une trachéotomie en urgence et diminue le risque de complications.

Utilisations électives

- Chirurgie micro-laryngée
- Bronchoscopie rigide
- Chirurgie ORL
- Pour faciliter une intubation difficile sous fibroscope




Le Manujet III est présenté sous la forme de kit complet avec injecteur manuel et cathéters. Ce système mécanique est simple et léger, transportable et immédiatement prêt à l'emploi.

MANUJET III

Mallette complète avec 4m de tube d'admission, les cathéters de Jet Ventilation selon Ravussin (13G, 14G, 16G,), tube de connexion de 100cm, Adaptateur Endojet (pour sonde E-T) et adaptateur pour bronchoscope.


REF
30-01-003

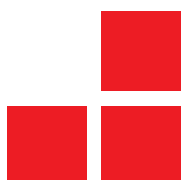

VBM Cathéters de Jet Ventilation

selon Ravussin

Dispositifs sûrs et atraumatiques permettant un abord trans-trachéal pour l'oxygénation et/ou la ventilation avec l'injecteur manuel (Manujet III) ou le ventilateur de Jet automatique à haute fréquence.

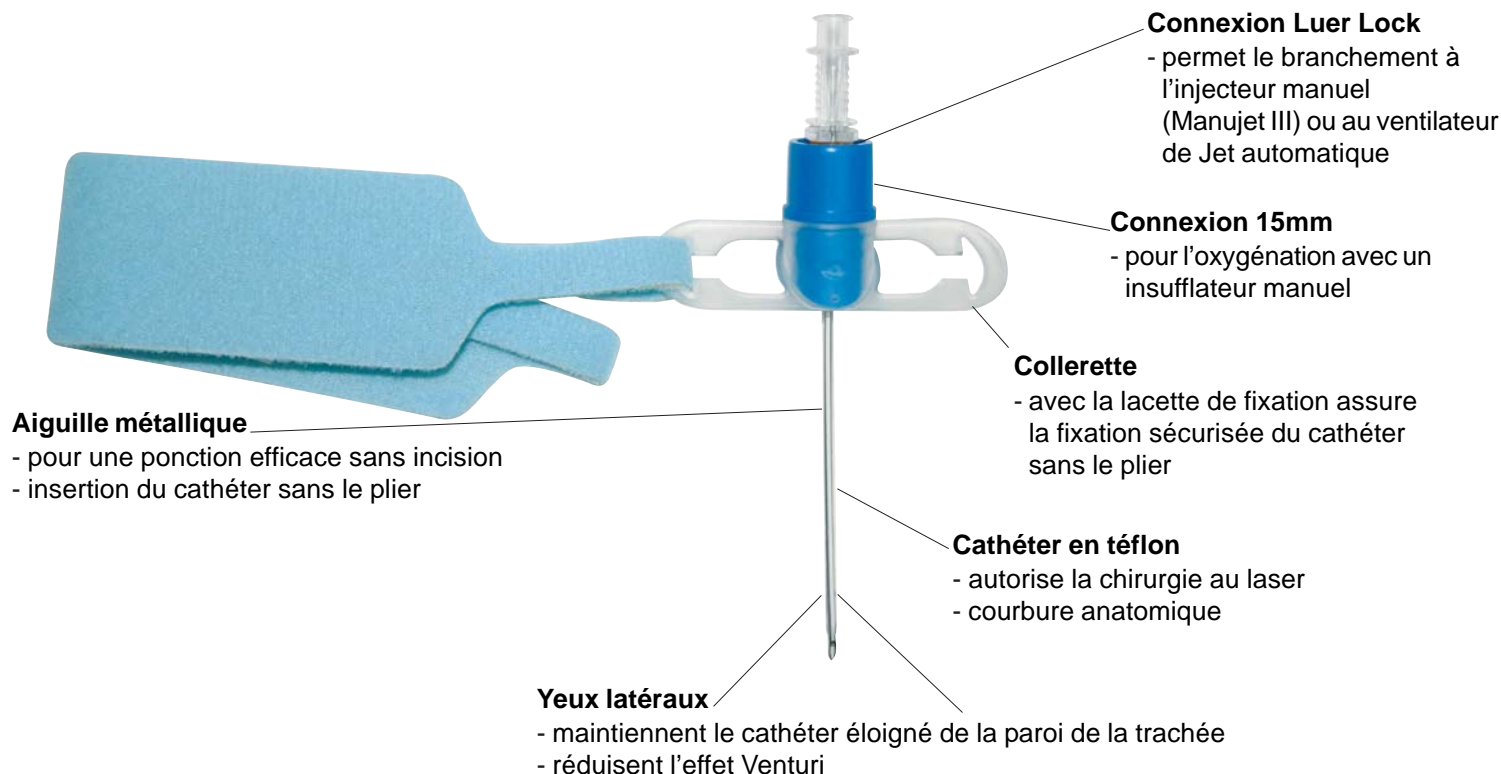

Références

KIT D'ANESTHÉSIE

Cathéters de Jet Ventilation selon Ravussin
stériles, 5 par boîte

Taille	Patient	REF
13G	Adulte	30-02-013-1
14G	Enfant	30-02-014-1
16G	Nourrisson	30-02-018-1

KIT D'URGENCE

Cathéters de Jet Ventilation selon Ravussin
stériles, 1 par boîte avec seringue

Taille	Patient	REF
13G	Adulte	30-02-913-1
14G	Enfant	30-02-914-1
16G	Nourrisson	30-02-918-1

Tube de connexion, longueur 100cm, avec Luer Lock

REF
54-05-111

Adaptateur Endojet, pour la connexion de la sonde endotrachéale, DI 15mm, rotatif, DE 22mm, orifices d'expiration, cathéter de 50cm ajustable avec Luer Lock, stérile

30-03-111-1

Adaptateur pour Bronchoscope, pour la connexion au Bronchoscope rigide, DI 15mm, rotatif, avec Luer Lock

60-70-005

VBM France sarl

ZAC de la Ferrage, Avenue Maréchal Leclerc, 13980 Alleins
Tél: 04 42 46 79 53, Fax: 04 42 46 79 54, e-mail: info@vbm-medical.fr

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 • DE-72172 Sulz a.N. • Germany
Tel.: +49 7454 / 959610 • Fax: +49 7454 / 959633
e-mail: info@vbm-medical.de • www.vbm-medical.de

