

# Information pour commander



**Tube Laryngé LT**, seringue code couleur et cale-dents

Taille	Patient	Poids / Taille	Code couleur	REF	Boîte
0	Nourrisson	< 5 kg	transparent	32-01-000	1
1	Bébé	5-12 kg	blanc	32-01-001	1
2	Enfant	12-25 kg	vert	32-01-002	1
2.5	Enfant	125-150 cm	orange	32-01-025	1
3	Adulte	< 155 cm	jaune	32-01-003	1
4	Adulte	155-180 cm	rouge	32-01-004	1
5	Adulte	> 180 cm	violet	32-01-005	1



**Tube Laryngé LT-D**, seringue code couleur et cale-dents

**Boîte de 10**

Taille	Patient	Poids / Taille	Code couleur	REF	Boîte
0	Nourrisson	< 5 kg	transparent	32-02-000-1	1
1	Bébé	5-12 kg	blanc	32-02-001-1	1
2	Enfant	12-25 kg	vert	32-02-002-1	1
2.5	Enfant	125-150 cm	orange	32-02-025-1	1
3	Adulte	< 155 cm	jaune	32-02-003-1	1
4	Adulte	155-180 cm	rouge	32-02-004-1	1
5	Adulte	> 180 cm	violet	32-02-005-1	1

**Boîte de 1**

0	Nourrisson	< 5 kg	transparent	32-02-100-1	1
1	Bébé	5-12 kg	blanc	32-02-101-1	1
2	Enfant	12-25 kg	vert	32-02-102-1	1
2.5	Enfant	125-150 cm	orange	32-02-125-1	1
3	Adulte	< 155 cm	jaune	32-02-103-1	1
4	Adulte	155-180 cm	rouge	32-02-104-1	1
5	Adulte	> 180 cm	violet	32-02-105-1	1

**Boîte d'urgence pour enfant**, un LT-D #0, #1, #2, #2.5 seringue et cale-dents **32-02-309-1** 1

**Boîte d'urgence pour adulte**, un LT-D #3, #4, #5, seringue code couleur et cale-dents **32-02-209-1** 1



**Tube Laryngé LTS II**, seringue code couleur et cale-dents

Taille	Patient	Poids / Taille	Code couleur	REF	Boîte
0	Nourrisson	< 5 kg	transparent	32-05-000	1
1	Bébé	5-12 kg	blanc	32-05-001	1
2	Enfant	12-25 kg	vert	32-05-002	1
2.5	Enfant	125-150 cm	orange	32-05-025	1
3	Adulte	< 155 cm	jaune	32-05-003	1
4	Adulte	155-180 cm	rouge	32-05-004	1
5	Adulte	> 180 cm	violet	32-05-005	1



**Tube Laryngé LTS-D**, seringue code couleur et cale-dents

**Boîte de 10**

Taille	Patient	Poids / Taille	Code couleur	REF	Boîte
3	Adulte	< 155 cm	jaune	32-06-003-1	1
4	Adulte	155-180 cm	rouge	32-06-004-1	1
5	Adulte	> 180 cm	violet	32-06-005-1	1

**Boîte de 1**

3	Adulte	< 155 cm	jaune	32-06-103-1	1
4	Adulte	155-180 cm	rouge	32-06-104-1	1
5	Adulte	> 180 cm	violet	32-06-105-1	1

**Boîte d'urgence pour adulte**, un LTS-D #3, #4, #5, seringue code couleur et cale-dents **32-06-209-1** 1

# VBM Gamme de Tube Laryngé

**Le Tube Laryngé est un dispositif supraglottique utilisable en anesthésie pour la ventilation spontanée ou mécanique. En urgence, c'est un dispositif efficace pour sécuriser « l'airway » lors de difficultés à ventiler le patient ou comme alternative au masque facial ou à l'intubation.**

Un des aspects les plus importants pour une réanimation réussie est la sécurisation de « l'airway ». Dans les recommandations actuelles de l'European Resuscitation Council (ERC), le Tube Laryngé a été implémenté comme moyen alternatif pour sécuriser «l'airway» en réanimation cardiopulmonaire.




**LT**

Simple lumière  
Autoclavable

Matériau : silicone

Emballé propre

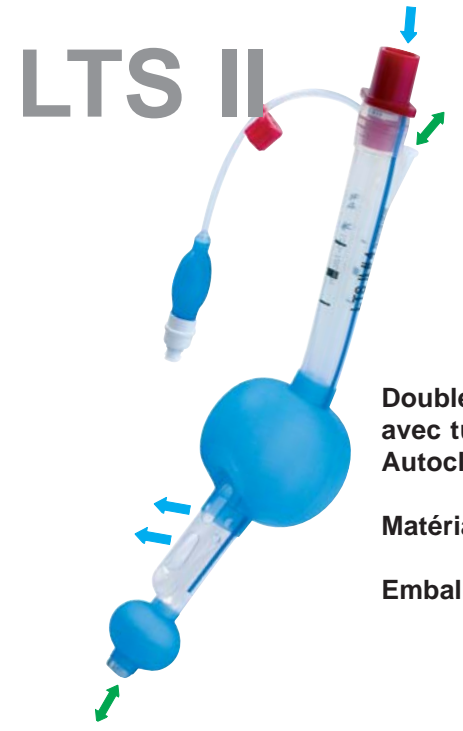

**LTS II**

Double lumière  
avec tube de drainage  
Autoclavable

Matériau : silicone

Emballé propre




**LT-D**

Simple lumière  
Usage unique

Matériau : PVC

Emballé stérile

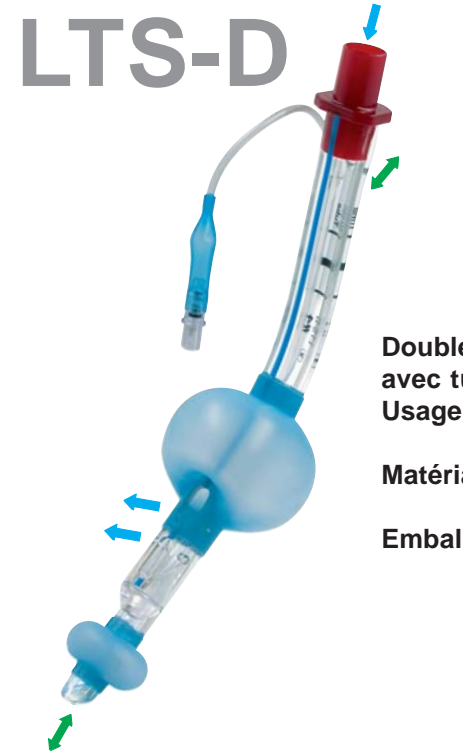


**LTS-D**


Double lumière  
avec tube de drainage  
Usage unique

Matériau : PVC

Emballé stérile

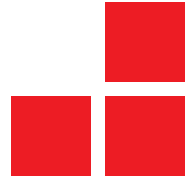

# Caracteristiques Produits

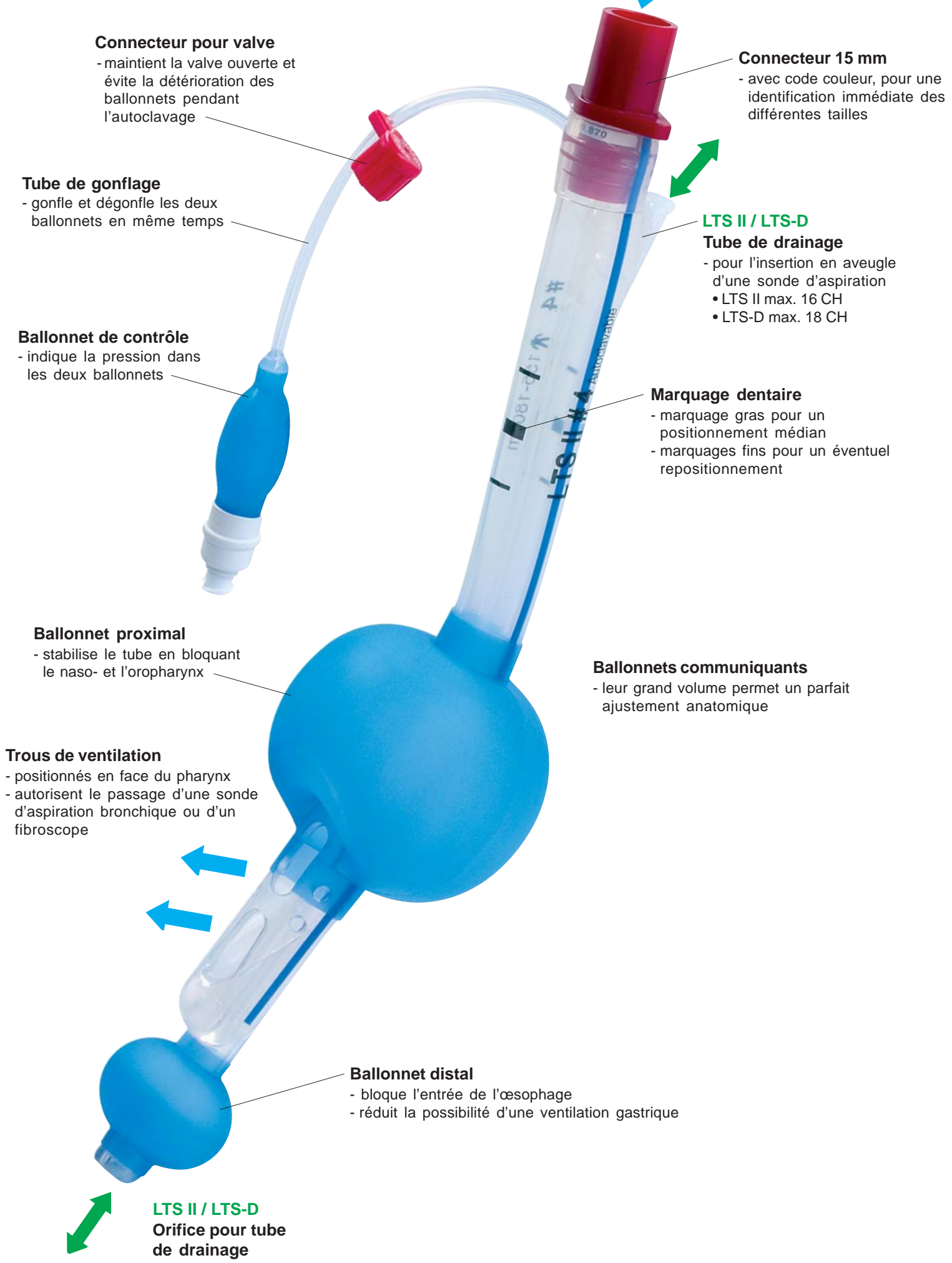

**Connecteur pour valve**  
- maintient la valve ouverte et évite la détérioration des ballonnets pendant l'autoclavage

**Tube de gonflage**  
- gonfle et dégonfle les deux ballonnets en même temps

**Ballonnet de contrôle**  
- indique la pression dans les deux ballonnets

**Ballonnet proximal**  
- stabilise le tube en bloquant le naso- et l'oropharynx

**Trous de ventilation**  
- positionnés en face du pharynx  
- autorisent le passage d'une sonde d'aspiration bronchique ou d'un fibroscope

**Ballonnet distal**  
- bloque l'entrée de l'œsophage  
- réduit la possibilité d'une ventilation gastrique

**Connecteur 15 mm**  
- avec code couleur, pour une identification immédiate des différentes tailles


**LTS II / LTS-D  
Tube de drainage**  
- pour l'insertion en aveugle d'une sonde d'aspiration  
• LTS II max. 16 CH  
• LTS-D max. 18 CH

**Marquage dentaire**  
- marquage gras pour un positionnement médian  
- marquages fins pour un éventuel repositionnement

**Ballonnets communicants**  
- leur grand volume permet un parfait ajustement anatomique

**LTS II / LTS-D  
Orifice pour tube de drainage**

# Caractéristiques Produits

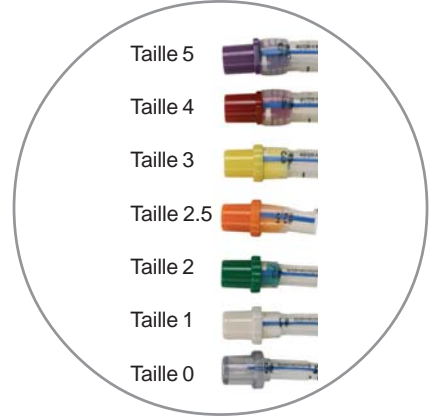


**CODE COULEUR**  
- les connecteurs et la seringue ont un code couleur  
- les volumes moyens de gonflage sont indiqués sur la seringue pour chaque taille afin de gonfler rapidement les deux ballonnets ensemble  
- pour une utilisation programmée une pression de 60cm d'H<sub>2</sub>O est recommandée (manomètre de contrôle VBM modèle « UNIVERSEL »)



**CALE-DENTS**  
- cliqué sur le tube, protège contre l'occlusion  
- assure la fixation du tube avec un élastique approprié



**DESIGN**  
- la forme et le design permettent une insertion en aveugle (sans laryngoscope) et un positionnement du Tube Laryngé dans l'hypopharynx

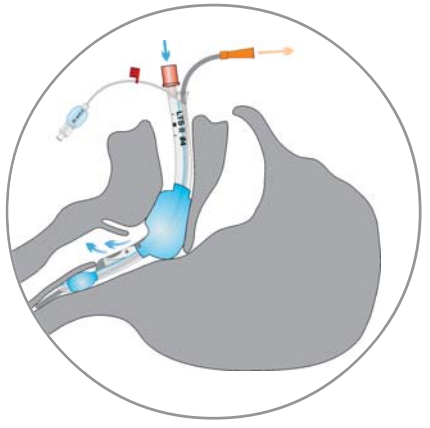

- deux modèles :  
• LT / LT-D, pour la ventilation  
• LTS II / LTS-D, pour la ventilation et sonde d'aspiration

# Accessoires



Manomètre de contrôle de pression "UNIVERSEL"  
dans des cas programmés  
Graduation avec 2 plages vertes  
- pour les tubes trachéaux (22-32 cm d'H<sub>2</sub>O)  
- pour les Tubes Laryngés ou Masques Laryngés (60-70 cm d'H<sub>2</sub>O)

REF 54-07-000



**Seringue**  
avec connexion Luer et code couleur pour les Tubes Laryngés

Taille	LT	REF	Boîte
20 ml	#0-1	54-04-111	10
60 ml	#2-3	54-04-444	10
100 ml	#4-5	54-04-555	10



**Cale dents avec bande élastique**  
- pour les tailles adultes #2 et 2.5  
Taille 4 REF 40-66-040-1 usage unique  
Taille 5 REF 40-76-050 autoclavable  
- pour les tailles adultes #3, 4 et 5  
Taille 6 REF 40-66-060-1 usage unique  
REF 40-76-060 autoclavable

