

Bestellinformation



Larynx-Tubus LT, farbcodierte Spritze und Beißblock

Größe	Patient	Gewicht / Größe	Konnektor	REF	VE
0	Neugeborene	< 5kg	transparent	32-01-000	1
1	Babys	5-12kg	weiß	32-01-001	1
2	Kinder	12-25kg	grün	32-01-002	1
2.5	Kinder	125-150cm	orange	32-01-025	1
3	Erwachsene	< 155cm	gelb	32-01-003	1
4	Erwachsene	155-180cm	rot	32-01-004	1
5	Erwachsene	> 180cm	violett	32-01-005	1



Larynx-Tubus LT-D

Größe	Patient	Gewicht / Größe	Konnektor	REF	VE
10er Set LT-D, farbcodierte Spritze und Beißblock					
2	Kinder	12-25kg	grün	32-02-002-1	1
2.5	Kinder	125-150cm	orange	32-02-025-1	1
3	Erwachsene	< 155cm	gelb	32-02-003-1	1
4	Erwachsene	155-180cm	rot	32-02-004-1	1
5	Erwachsene	> 180cm	violett	32-02-005-1	1
1er Set LT-D, farbcodierte Spritze und Beißblock					
2	Kinder	12-25kg	grün	32-02-102-1	1
2.5	Kinder	125-150cm	orange	32-02-125-1	1
3	Erwachsene	< 155cm	gelb	32-02-103-1	1
4	Erwachsene	155-180cm	rot	32-02-104-1	1
5	Erwachsene	> 180cm	violett	32-02-105-1	1
Notfall Set, LT-D #3, #4, #5, farbcodierte Spritze und Beißblock				32-02-209-1	1



Larynx-Tubus LTS II, farbcodierte Spritze und Beißblock

Größe	Patient	Gewicht / Größe	Konnektor	REF	VE
0	Neugeborene	< 5kg	transparent	32-05-000	1
1	Baby	5-12kg	weiß	32-05-001	1
2	Kinder	12-25kg	grün	32-05-002	1
2.5	Kinder	125-150cm	orange	32-05-025	1
3	Erwachsene	< 155cm	gelb	32-05-003	1
4	Erwachsene	155-180cm	rot	32-05-004	1
5	Erwachsene	> 180cm	violett	32-05-005	1



Larynx-Tubus LTS-D

Größe	Patient	Gewicht / Größe	Konnektor	REF	VE
10er Set, farbcodierte Spritze Beißblock					
3	Erwachsene	< 155cm	gelb	32-06-003-1	1
4	Erwachsene	155-180cm	rot	32-06-004-1	1
5	Erwachsene	> 180cm	violett	32-06-005-1	1
1er Set LTS-D, farbcodierte Spritze und Beißblock					
3	Erwachsene	< 155cm	gelb	32-06-103-1	1
4	Erwachsene	155-180cm	rot	32-06-104-1	1
5	Erwachsene	> 180cm	violett	32-06-105-1	1
Notfall Set, LTS-D #3, #4, #5, farbcodierte Spritze und Beißblock				32-06-209-1	1


VBM Larynx-Tubus

Der Larynx-Tubus ist ein supraglottischer Luftweg für die Anwendung in der Allgemeinanästhesie unter spontaner oder positiver Druckbeatmung. Im Notfall ist der Larynx-Tubus ein ideales Hilfsmittel zur Atemwegssicherung beim schwierigen Atemweg, als alternative Technik zur Maskenbeatmung und endotrachealen Intubation.

Die Sicherung des Atemweges ist einer der zentralen Aspekte bei der Durchführung einer erfolgreichen Reanimation. In den aktuellen Leitlinien des European Resuscitation Council (ERC) wurde der Larynx-Tubus als ein weiteres Instrument zur Sicherung des Atemweges für die cardiopulmonale Reanimation aufgenommen.



Einlumiger Tubus, autoklavierbar
Material: Silikon
Rein verpackt

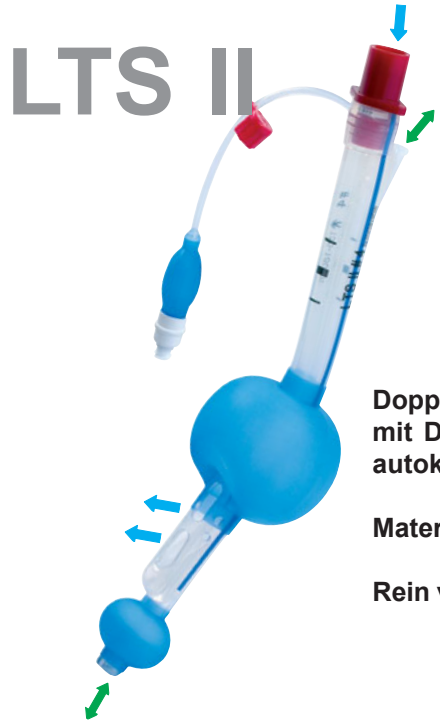

Doppellumiger Tubus mit Drainagekanal, autoklavierbar
Material: Silikon
Rein verpackt




Einlumiger Tubus zum Einmalgebrauch
Material: PVC
Steril verpackt




Doppellumiger Tubus mit Drainagekanal zum Einmalgebrauch
Material: PVC
Steril verpackt

Produkteigenschaften

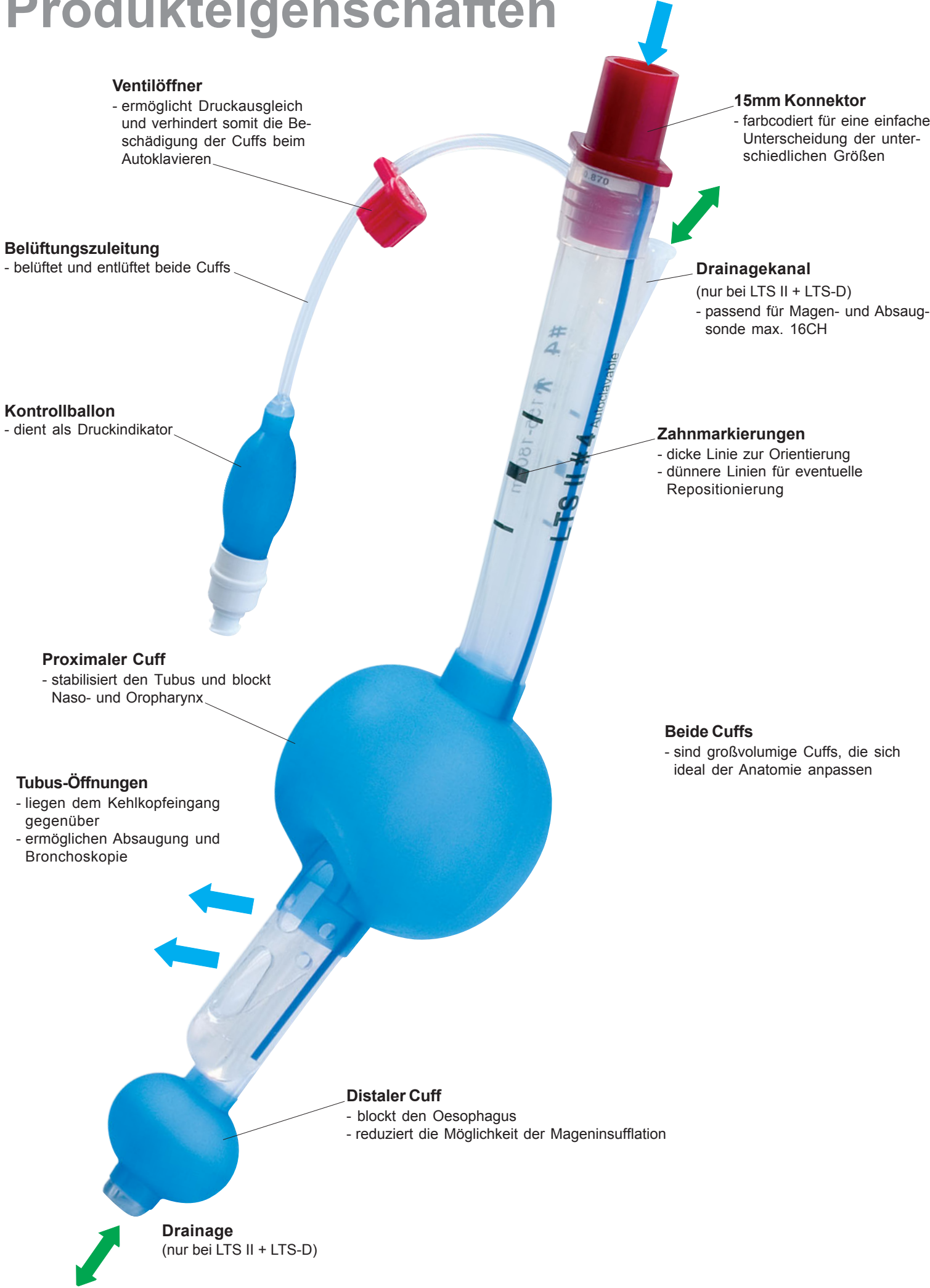

Beide Cuffs
- sind großvolumige Cuffs, die sich ideal der Anatomie anpassen


Produkteigenschaften

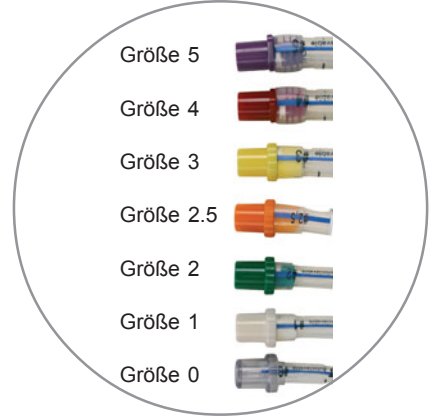

FARBCODIERUNG
- Konnektoren und Spritze sind farbcodiert
- die ungefähren Füllvolumen der jeweiligen Größen sind auf der Spritze angegeben, um ein schnelles Belüften zu ermöglichen
- bei elektiven Anwendungen wird ein Cuffdruck von 60cmH₂O empfohlen (VBM Cuffdruckmeßgerät "UNIVERSAL")



BEIßBLOCK
- klickt in den Tubus und schützt diesen vor Okklusion
- ermöglicht Tubusfixation mittels elastischem Halsband

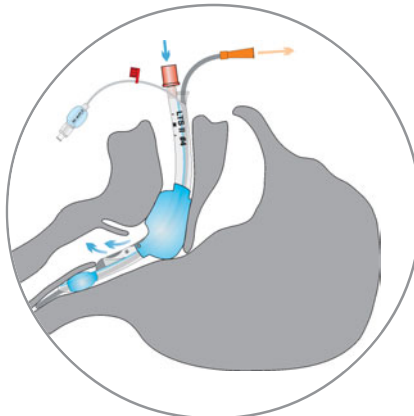

DESIGN
- Form und Design ermöglichen ein blindes Einführen (ohne Laryngoskopie) und positionieren den Larynx-Tubus im Hypopharynx
- leichtes Einführen ermöglicht den Gebrauch des Larynx-Tubus durch unerfahrenes Personal

Zubehör



Cuffdruckmeßgerät "UNIVERSAL"
- ermöglicht den Druck von 60cmH₂O bei elektiven Anwendungen zu halten
REF 54-07-000



Spritze
mit Luer Anschluss und Farbcodierung für Larynx-Tuben

Größe	LT	REF	VE
20ml	Gr. 0-1	54-04-111	10
60ml	Gr. 2-3	54-04-444	10
100ml	Gr. 4-5	54-04-555	10



Beißblock
Größe 6, passend für Larynx-Tuben Größe 3,4 und 5
REF 40-70-060 autoklavierbar
REF 40-60-060-1 Einmalgebrauch
Größe 5, passend für Larynx-Tuben Größe 2 und 2.5
REF 40-70-050 autoklavierbar
REF 40-60-050-1 Einmalgebrauch



Elastisches Halsband
Länge: 75cm
REF 40-06-075 VE 10

